CARIE ABRASIONE & EROSIONE



TRATTAMENTO DOMICILIARE
50 ml



TRATTAMENTO PROFESSIONALE
150 ml

MOUSSE AZIONE D'URTO - Fragola o Menta Delicata - 1450 ppm di F^-

- Remineralizza rapidamente smalto e dentina fortemente demineralizzati
- Aumenta la resistenza agli attacchi acidi, meccanici e batterici
- Indicato in soggetti con carie frequenti ed elevata usura delle superfici dentali e bocca secca
- Ideale in seguito a trattamenti ortodontici e sbiancamento
- Coadiuvante nel trattamento delle white spots e MIH

IMPIEGO: È particolarmente indicata come soluzione rapida in caso di erosioni acide da alimentazione o reflusso gastroesofageo, abrasioni anche molto estese, abfraction e aree dello smalto fortemente demineralizzate a causa di xerostomia (bocca secca), scarsa igiene orale. Utile in soggetti portatori di apparecchi ortodontici e particolarmente predisposti a forti demineralizzazioni (pazienti affetti da sindrome di Sjogren, diabete, in radio/chemioterapia).

MODALITÀ D'USO:

PROFESSIONALE: Applicare nella mascherina una quantità di prodotto necessaria al riempimento di metà della sua altezza. Posizionare la mascherina sulle arcate dentali e lasciare agire per 3-5 minuti. Espellere il prodotto in eccesso senza sciacquare. Proseguire con il TRATTAMENTO DOMICILIARE e in caso di necessità ripetere l'applicazione in studio a intervalli di 7 giorni.

DOMICILIARE: Applicare il prodotto due volte al giorno con uno spazzolino morbido o con un dito pulito e asciutto. Lasciare agire sullo smalto dentale per circa 2 minuti. Espellere il prodotto in eccesso senza sciacquare. Si consiglia di non mangiare o bere per almeno 30 minuti dall'applicazione.

DENTI SENSIBILI



TRATTAMENTO DOMICILIARE
50 ml



TRATTAMENTO PROFESSIONALE
150 ml

MOUSSE AZIONE D'URTO - Gusto Tutti Frutti - 1450 ppm di F^-

- Abbatte rapidamente il dolore
- Occlude i tubuli dentinali
- Protegge dalla sensibilità nel tempo
- Remineralizza rapidamente smalto e dentina

IMPIEGO: È particolarmente indicata come soluzione rapida in caso di sensibilità dentinale causata da recessioni gengivali, erosioni ed abrasioni dentarie trattamenti odontoiatrici come sbiancamento dentale, ablazione del tartaro, levigatura radicolare, ricostruzioni dentarie. I Sali di potassio aggiunti alla formulazione riducono il dolore da ipersensibilità dentinale.

MODALITÀ D'USO:

PROFESSIONALE: Applicare nella mascherina una quantità di prodotto necessaria al riempimento di metà della sua altezza. Posizionare la mascherina sulle arcate dentali e lasciare agire per 3-5 minuti. Espellere il prodotto in eccesso senza sciacquare. Si consiglia di non mangiare o bere per almeno 30 minuti dall'applicazione. Proseguire con il TRATTAMENTO DOMICILIARE e in caso di necessità ripetere l'applicazione in studio a intervalli di 7 giorni.

DOMICILIARE: Applicare il prodotto due volte al giorno con uno spazzolino morbido o con un dito pulito e asciutto. Lasciare agire sullo smalto dentale per circa 2 minuti. Espellere il prodotto in eccesso senza sciacquare. Si consiglia di non mangiare o bere per almeno 30 minuti dall'applicazione.

AVVERTENZE: Non deglutire. Uso esterno.Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia a uno o più componenti. Tenere al riparo da fonti di luce e calore. Dopo l'uso non disperdere il contenitore nell'ambiente. **È UN DISPOSITIVO MEDICO** CE Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso.

Completa l'opera della tua igiene orale anche con la linea di dentifrici e collutori
Biosmalto Carie Abrasione & Erosione e Biosmalto Denti Sensibili



CURASEPT
FIRST BECAUSE WE CARE

BIOSMALTO

CURASEPT
FIRST BECAUSE WE CARE

BIOSMALTO

IL PROBLEMA

L'azione quotidiana di agenti aggressivi quali placca batterica, alimenti della dieta, masticazione e manovre di igiene orale scorrette, può comportare una perdita di sostanze minerali, spesso irreversibile. L'azione singola o combinata di questi fattori aggressivi può comportare, se sufficientemente prolungata, situazioni patologiche quali la carie e l'ipersensibilità dentinale.
Gli elementi dentari sono costituiti principalmente da 2 tessuti altamente mineralizzati: lo smalto e la dentina. Il loro costituente di base è un "minerale" organizzato in cristalli esagonali che prende il nome di **IDROSSIAPATITE**. A seconda delle cause di perdita di strutture dentarie, possiamo distinguere:

- Carie dentaria
- Abrasioni
- Erosioni

La carie è una malattia infettiva trasmissibile dovuta alla produzione di sostanze acide da parte dei batteri. Se non trattata le strutture dentarie perdono progressivamente i minerali che le costituiscono e si indeboliscono. Questo processo prende il nome di "demineralizzazione". Le lesioni cariose iniziali sono ancora reversibili, ma se non vengono opportunamente trattate possono creare delle vere e proprie cavità, che necessitano l'intervento del dentista.

Le abrasioni rappresentano un indebolimento della struttura dentaria ma anche un problema rilevante dal punto di vista estetico. Le cause principali sono:
1) masticazione fisiologica;
2) fenomeni come serramento o bruxismo;
3) spazzolamento traumatico con spazzolino con setole troppo dure;
4) Utilizzo di dentifrici abrasivi.

Le erosioni dentarie si distinguono dalla carie dentaria poiché non prevedono l'azione dei batteri cariogeni. Possono essere causate da acidi provenienti dallo stomaco, probabilmente per fenomeni di reflusso gastro-esofageo, oppure da acidi di origine alimentare come agrumi, succhi di frutta, bevande gassate, integratori alimentari.
L'erosione può portare ad un assottigliamento eccessivo delle strutture dentarie, queste si possono rompere facilmente anche se sottoposte a carichi masticatori non particolarmente intensi.

La sensibilità dentinale è una sensazione di dolore acuto e di breve durata che insorge dopo stimoli termici, tattili, chimici o fisici. È una problematica che colpisce gran parte della popolazione, almeno saltuariamente, e tende ad aggravarsi col passare degli anni.
La causa risiede nell'esposizione dei tubuli dentinali. Normalmente i tubuli dentinali non sono esposti al cavo orale, ma possono diventarlo a seguito di recessioni gengivali, erosioni ed abrasioni cervicali o problematiche parodontali.

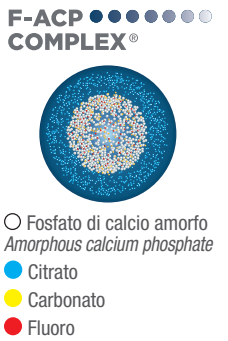
Purtroppo, qualunque sia la causa (carie, erosioni, abrasioni, traumi,...), una volta danneggiati smalto e dentina non sono in grado di autoriparsi.
Pertanto la loro remineralizzazione può avvenire solo grazie ad interventi esterni che consentano la formazione e la ricrescita di cristalli di idrossiapatite che costituiscono la loro naturale struttura.

LA SOLUZIONE

CURASEPT BIOSMALTO MOUSSE AZIONE D'URTO è un prodotto innovativo sviluppato in collaborazione con prestigiosi Laboratori Internazionali di Ricerca Biotecnologica, clinicamente testato. Formula brevettata.
CURASEPT BIOSMALTO MOUSSE AZIONE D'URTO è costituito da una fase di Calcio Fosfato Amorfo funzionalizzata con ioni Carbonato e Fluoro, rivestita con Citrato: **F-ACP Complex.**

L'**F-ACP Complex** è un materiale amorfo altamente reattivo che si converte rapidamente in idrossiapatite: è infatti un precursore di smalto e dentina. A contatto con la saliva rilascia rapidamente ioni attivi che penetrano selettivamente nei siti danneggiati dello smalto, dove agiscono formando nuova fase minerale più resistente di quella naturale **(remineralizzazione).**
Le ridotte dimensioni del complesso sono in grado di penetrare nei tubuli dentinali, occludendoli, riducendo la sensibilità.
La presenza di **Fluoro**, contribuisce a sviluppare una nuova fase minerale **più resistente alla carie abrasione ed erosione.**

Test in vitro hanno mostrato come l'F-ACP a contatto con la dentina (completamente demineralizzata tramite pre-trattamento con acido fosforico) è in grado di remineralizzare e di occludere i tubuli dentinali già dopo 15 minuti di applicazione.

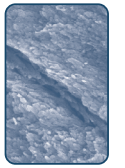


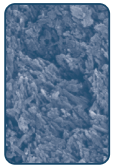
TECNOLOGIA BIOISPIRATA

nanoparticella di fosfato di calcio amorfo arricchita con carbonato e fluoro. Strato esterno costituito da citrato.

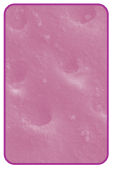
Studi in vitro dimostrano l'efficacia di BIOSMALTO nel trattamento dei tessuti demineralizzati e nel trattamento dei tubuli dentinali scoperti che causano l'ipersensibilità dentinale.

INGRANDIMENTO SEM MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE


Dente demineralizzato.


Dente trattato con BIOSMALTO.


Tubuli dentinali aperti causano sensibilità.


Dopo trattamento con BIOSMALTO. Tubuli dentinali chiusi scomparsa della sensibilità.

Curasept S.p.A.
Via G. Parini, 19 - 21047 Saronno (VA) - Italy
www.curasept.it

FOGLIETTO
22
PAP
Carta
RACCOLTA DIFFERENZIATA
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE

Rev. 30/09/2022
XDP00020